

SIEMENS

Анализатор
гликозилированного гемоглобина,
микроальбумина, креатинина

DCA Vantage®

Простота и надежность



Мы работаем на будущее

МедСервис

Следуя наиболее актуальным и современным направлениям в медицине, компания МедСервис на отечественном рынке диагностического оборудования представляет продукцию компании Siemens Healthcare Diagnostics, мирового производителя уникальных решений в сфере здравоохранения.

Анализатор гликозилированного гемоглобина, микроальбумина, креатинина

DCA Vantage®

Общие сведения

Описание системы	Иммунологический Анализатор
Количественные Тесты	Гликозилированный гемоглобин HbA1c (цельная кровь): Диапазон: от 2.5% до 14% Соотношение микроальбумина/креатинин (в моче): Три результата из одного картриджа : Альбумин: 5 to 300 мг/л; Креатинин: 15 to 500 мг/дл (1.3 to 44.2 ммоль/л); Соотношение Альбумин/Креатинин: от 1 до 2000 мг/г (от 0,11 до 22 мг/ммоль)
Формат	Одноразовый готовый к использованию картридж
Измерение	Автоматическое, оптическое
Метод определения	Ингибирование реакции латекс-агломинации
Время до получения результата	в течении 6 мин

Определение

Объем пробы	Гликозилированный гемоглобин HbA1c 1 мкл; Соотношение микроальбумина/креатинин (в моче) 40 мкл
Идентификация пробы	Сенсорный цветной дисплей или сканер
Приготовление пробы	не требуется

Калибровка

Калибровка	Автоматическая калибровка по карте прилагаемой к картриджу
------------	--


Компьютер / Интерфейс

Объем памяти	4000 пациентов и данные контролей
Дисплей	Цветной , сенсорный
Передача данных	USB порт
Серийный порт	Rs232, двух сторонний
Сетевое подключение	10/100 Мбит, двух сторонний
Внешний сканерcode (опция)	Serial (9 pin)
Внутренний принтер	54 мм термопринтер
Внешний принтер	через USB порт


Общие характеристики

Размер	25.4 (в) x 28.7 (ш) x 27.7 (г) см
Вес	3.88 кг
Электропитание	от 100 до 240 В; 50/Гц
Максимальная мощность	30 Вт
Окружающая температура	от 18 до 30 С Альбумин От 15 до 32 С HbA1c
Влажность	10 to 90%,

DCA Vantage Анализатор HPLC Метод, HbA1c Результат

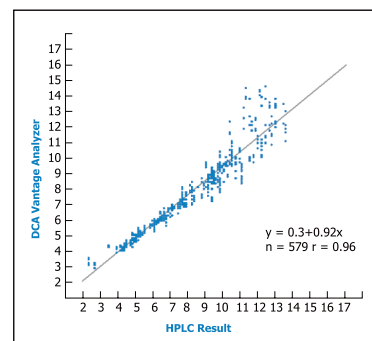

DCA Vantage Анализатор DCA 2000 HbA1c Результат

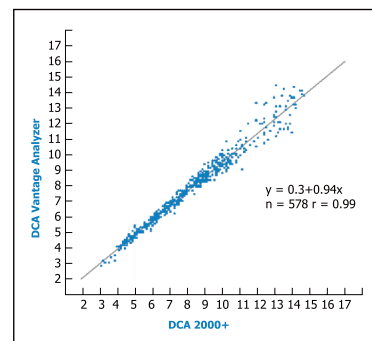

МедСервис

115114 Россия, Москва,
ул. Дербеневская, д.20, стр.32, Т / П "Кожевники"
Телефон: +7 (495) 633-23-53
+7 (495) 633-23-52
+7 (495) 633-24-34
+7 (495) 633-23-26
Факс: +7 (495) 633-26-16
E-mail: office@medserBice.biz